



Multi Cell 高通量电泳槽


可同时运行120个样本，且外形小巧节省空间。

高通量高效率
同时跑8块胶

可接冷却循环
防止系统过热

宽板加宽泳道
条带平整清晰

前后开电极门
缓冲液易释放

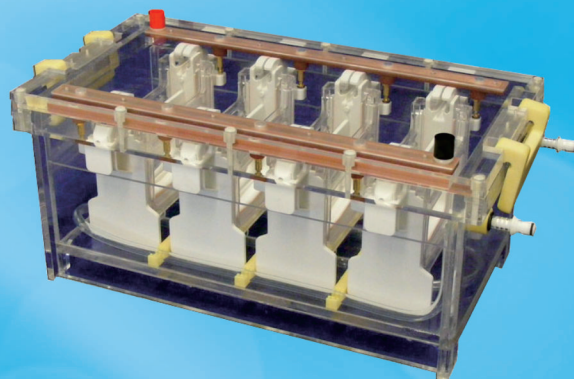

轻按固定锁
即可弹开夹门

U型弹性密封胶圈可有效
将玻璃板紧扣于电极上

镀金电极头防腐蚀，
单向固定槽避免正负
电极安装颠倒

小竖板引导插入
玻璃板到正确位置
固定，并防止玻璃
板脱落

铂金丝位置与胶片宽度相同，
电场均匀顺畅

透明夹门方便观察；
前开门设计可在电泳结束后
在槽内释放出内部缓冲液，
避免弄湿实验台，
同时减少缓冲液多次冲刷电极

Multi-Cell高通量电泳槽专为高通量蛋白质凝胶电泳设计，系统配备冷却管设计可连接外部冷却循环器为缓冲液降温。Multi-Cell可以同时运行8块凝胶（最多120个样本），推荐选择ELITE 600U电泳仪配合使用。与V-GES垂直电泳槽相一致的，Multi-Cell同样采用较宽玻璃板与泳道设计，让样本在电泳过程中更均匀地被电场分离，并且保持条带平整。电极门可从前后方向弹开，让内部缓冲液先释放后再取出电极，提高了使用效率。

可搭配WEALTEC湿式转印与半干转印系统



E-Blotter 湿式转印槽



Yrdimes 半干转印槽

带止滑纹路翼形扳手
可轻松松开夹门

双夹扣门锁固定夹子
防止玻璃倾斜

双独立胶条密封不漏胶，
方便更换不同厚度胶条
满足不同制胶厚度需要


校正板精确校正胶条位置，
防漏胶、防止U型玻璃板受力
不均导致损坏

内面橡皮纹路玻璃
更密和，凝胶更平整

夹门180度旋转，可平躺
灌胶座安装玻璃板

双方形拆卸口方便四指
从后方向前推出玻璃板

型号	Multi Cell 高通量电泳槽
凝胶尺寸(mm)	100 x 80 (W x H)
玻璃板尺寸(mm)	100 x 130 (W x H)
凝胶厚度(mm)	1.0/0.5/0.75
凝胶数	可以同时运行8块凝胶
梳子齿数	10/15
电极芯	4个
灌胶器	8个
缓冲液容积(L)	3-5.5
电线	高效能红黑电线
槽尺寸(mm)	432 x 226 x 195 (W x D x H)
重量(kg)	8
推荐电源	ELITE 600U 电泳仪
认证	CE
选配	
冷却	外部水冷却器

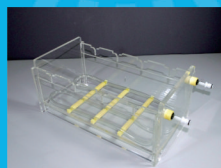

冷却管设计可外接冷却循环器降温



上盖两侧特制手柄可轻松闭合系统